

# Регулировка глубины бассейна

Ewas-Medical, Нидерланды

Система регулирования глубины бассейна может быть встроена как в уже готовый бассейн, так и запроектирована на этапе строительства бассейна.

Как это работает?

Регулировка глубины – это фальшпол, вертикально перемещающийся в толще воды и фиксируемый на необходимой глубине. Уровень фальшпола регулируется от технологического минимума (30-40 см от дна бассейна) до уровня поверхности воды. Механическая система использует поршень, работающий на обычной водопроводной воде.

Особенности:

- фальшпол может покрывать не всю площадь бассейна, а только его часть
- даёт возможность помещать пациентов в бассейн на каталках или в креслах-каталках
- увеличивает список категорий пациентов для занятий в бассейне
- минимальный размер фальшпола 2 x 4 м
- максимальный размер фальшпола 10 x 14 м
- даёт возможность встроить подводную беговую дорожку **Pooltrack Professional**

Регулировка глубины на всей площади бассейна.

Велотренажёр Ewas Medical и тренажёры для ЛФК в воде.




Подробнее



Управление глубиной и беговой дорожкой с помощью пульта на бортике бассейна.

Регулировка глубины на части бассейна с защитной шторкой.

Встроенная подводная беговая дорожка **Pooltrack Professional**.

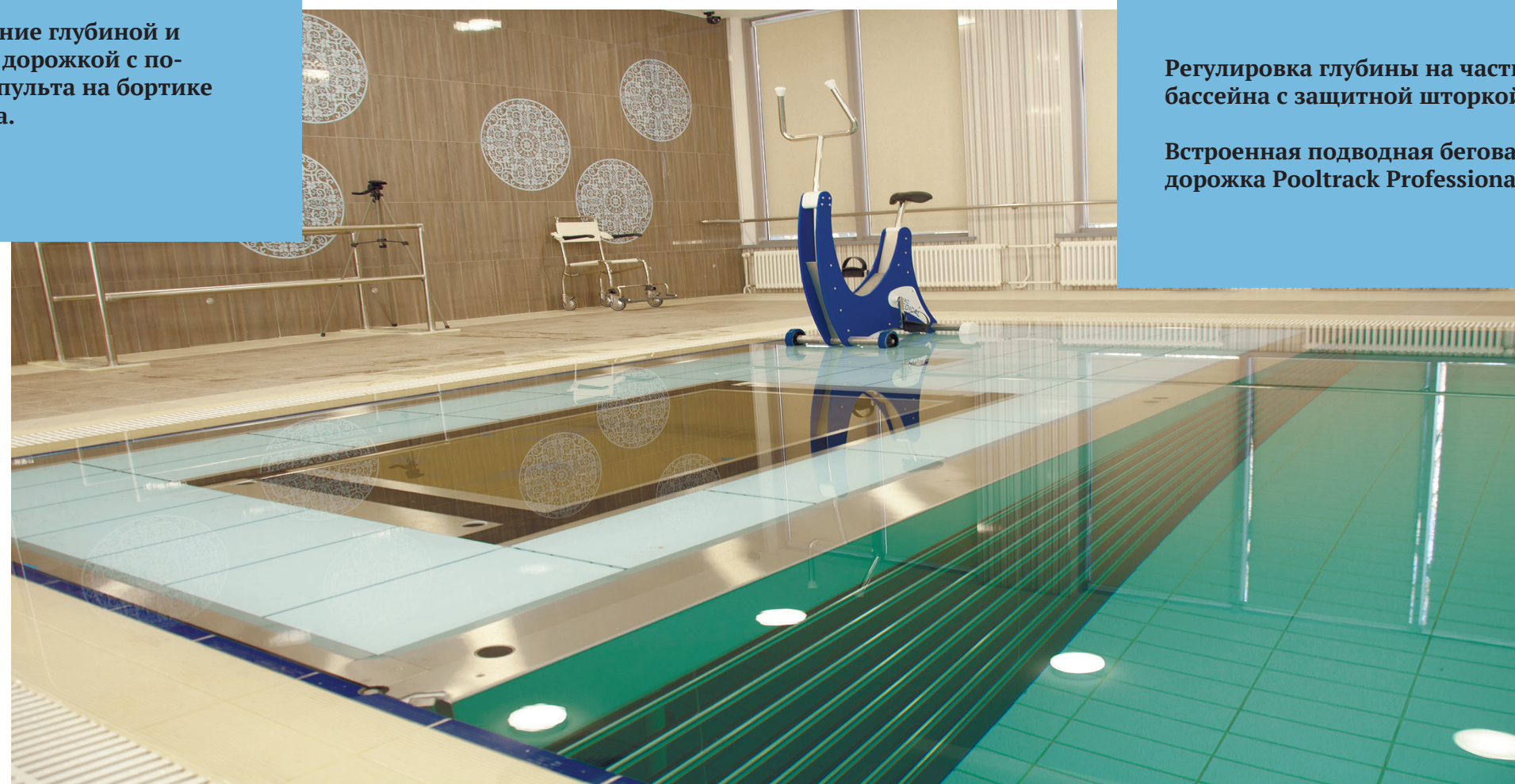

**Превратите обычный бассейн в инновационное оборудование для реабилитации и спортивных тренировок!**